


Protección de posicionamiento infinita *Infinite*

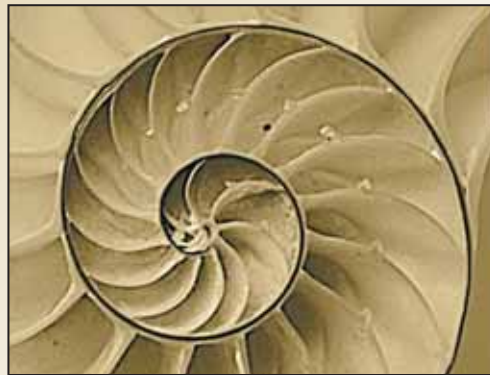

Protección máxima de decúbito y traumatismo del tejido en su
quirófano
Almohadillas y Posicionadores de quirófano Action® clínicamente
probados

ACTION®

Action Products, Inc.





Herida por presión

Sus pacientes de cirugía están en riesgo

EL PROBLEMA

El traumatismo del tejido y la descomposición de la piel en el quirófano es un problema serio que afrontan los profesionales quirúrgicos y sus pacientes cada día. La prevención de úlceras por presión ayuda a evitar dolor innecesario, padecimientos, gasto y en el peor de los casos, la muerte. El entendimiento y la identificación de las causas principales de las úlceras por presión ayudarán a los profesionales a proveer el mejor cuidado preventivo posible.



El problema "A"



El Problema "B"

El cierre de capilares está a la raíz de la formación de la úlcera. La obstrucción o daño de los capilares previenen el mantenimiento natural de piel saludable. Sin la entrega de oxígeno y nutrientes y la eliminación de residuos, las células mueren y los tejidos se descomponen; se forman úlceras. El proveer flujo de sangre sin restricción es imprescindible en la prevención de úlceras.

La presión y el cizallamiento son las causas principales del cierre de capilares. Cuando la presión o el cizallamiento son excesivos y/o prolongados, el riesgo de agrietamiento es más alto. Las prominencias óseas son las más susceptibles de daño, aunque cualquier área que experimente estas condiciones es vulnerable. El tomar medidas para disminuir los efectos negativos de la presión y el cizallamiento es crítico en prevenir úlceras.

El calor y la humedad son dos factores los cuales actúan como catalizadores en el proceso del agrietamiento de la piel. La habilidad de controlar estos factores y aliviar el desarrollo de "puntos calientes" en los sitios de presión alta también ayudarán a minimizar el riesgo para el paciente.

LA SOLUCION

La implementación del protocolo de calidad, el cual incorpora el uso de dispositivos de posicionamiento apropiados, es la solución. El cuidado preventivo significa usar almohadillas y posicionadores Action[®], los cuales han sido parte de la solución, en todo el mundo, por más de 30 años.



La solución

Los productos de quirófano Action[®] ayudan a evitar el aumento excesivo de presión y el cierre de capilares. Los productos Action[®] distribuyen el peso regularmente y proveen apoyo constante debajo de los pacientes porque ¡no tocan fondo! El polímero Akton[®] reduce el cizallamiento moviendo con la piel, no en contra de ésta. La textura suave para la piel lo hace muy comfortable. El calor y la humedad se controlan por la habilidad del material de irradiar calor regularmente por todo el producto. Esto reduce el riesgo del desarrollo de "puntos calientes" potencialmente peligrosos, mientras provee un ambiente de temperatura uniforme para el paciente. Esta capacidad también hace al producto ideal para el uso con mantas calentadoras o enfriadoras.

Los productos de la marca Action[®] también tienen estos beneficios adicionales

- Acceso económico
- Rápido y fácil de limpiar
- Radiolúcido
- Libre de látex
- Libre de plastificante
- Libre de silicona
- Reutilizable
- Más de 100 productos
- Equivalente a tejido
- No sustentará el crecimiento de bacterias

Testimonios

Los productos de Action tienen soluciones



“Muchas gracias por fabricar este producto y por ser tan sensibles a nuestras necesidades.”

Posicionamiento intraoperativo y cuidado del paciente obeso. Robert B. Dybec, RN, MS, CPSN, CNOR

La Asociación de enfermeras registradas perioperativas recomiendan que los dispositivos para almohadilla y posicionamiento mantengan la presión de interfaces de los capilares de 32 mmHg o menos, de ese modo reduce el riesgo de úlceras por presión adquirida en el quirófano (Asociación de enfermeras registradas perioperativas, 2004). Las almohadillas y los almohadones hechos de polímeros viscoelásticos, tales como polímero Akton[®], reducen la presión y proveen soporte adecuado para la posición deseada.

Prevención de úlceras por presión intraoperativas: Un análisis de materiales de cama. Victoria M. Hoshowsky y Carol A. Schramm

Los cambios de la piel fueron más probablemente con un colchón estándar o con cirugía de más de 2 horas y media.

“El revestimiento de los colchones viscoelásticos fueron más efectivos que la espuma y el gel o colchones de espuma estándar para prevenir la formación de úlceras por presión.”

Una prueba controlada aleatoria secuencial compara una almohadilla de polímero viscoelástico y un colchón de mesa de operaciones estándar en la prevención de úlceras por presión posoperativo.

J. Nixon, D. McElvenny, S. Mason, J. Brown, S. Bond, International Journal of Nursing Studies:

“El costo mínimo de las almohadillas de polímero viscoelástico seco, en comparación con el costo del tratamiento de úlcera por presión y el costo personal a pacientes, en relación al dolor y malestar, apoya su uso general dentro de la práctica del quirófano.”

LAS ALMOHADILLAS ESTAN CONSIDERADAS MAS EFECTIVAS


Los cirujanos destacados y enfermeros confían en las almohadillas de Action para hacer cada procedimiento más fácil, y proteger sin fallas a cada paciente de úlceras por presión.

A.D. Pacifico, M.D., Catedrático y Director de la Division of Cardiothoracic Surgery, de The University of Alabama en Birmingham, envió una carta a Action Products, Inc. el 28 de abril de 1989 que afirmó:

Estimada señora McElroy:

Hemos probado las almohadillas para la protección de la piel fabricadas por su compañía y las encontramos extremadamente útiles en la protección de puntos de presión durante la cirugía. Particularmente me gusta la naturaleza fina, no abultada de estas almohadillas y estoy seguro que las mismas serán realmente efectivas en reducir los problemas de necrosis de compresión durante la cirugía de corazón abierto. Espero tenerlas en cada uno de nuestros quirófanos de cirugía cardiovascular.

Muchas gracias por fabricar este producto y por ser tan sensibles a nuestras necesidades.

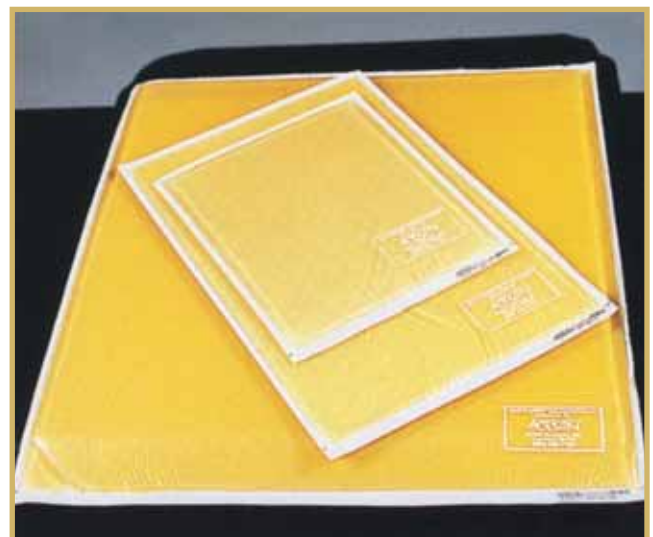

Modelos 40402, 40403 y 40404 (vea la página 10)



| PRODUCTO | MODELO | PAGINA |
|---|--|----------------|
| Almohadillas de mesa de operaciones | 40100 – 40101 40103 – 40105 40106 – 40108 | 2 – 3 |
| Almohadillas de cabeza | 40200 – 40207 40209 – 40213 40216L – 40218 | 4 – 6 |
| Almohadillas de brazos/ hombros/codos | 40130 – 40130S 40300 – 40304L 40306 – 40310 40313-2 – 40313-3 40315 – 40316-2 40321 | 7 – 9 |
| Almohadillas de tobillos/ pies/talones | 40400 – 40404 40502 40520 | 10 – 11 |
| Almohadillas de estribo | 40500 – 40501 40503 40510 – 40511 | 12 |
| Rollos de posicionamiento del pecho | 40600 – 40601 40616 – 40621 40639 – 40646 40622 – 40626 | 13 – 14 |
| Posicionadores | 40602 – 40605 40610 40612 – 40613 40615 40630 40718LP – 40718LP-2 | 15 – 16 |
| Posicionadores pediátricos | 40120 – 40120L 40208 40614 | 17 |
| Almohadillas para armadura especial | 40110 40320 40330 40700 – 40713 40717 40900 – 40902 | 18 – 22 |
| Productos complementarios | 40102 40800 – 40801 40803 – 40805 40715 KIT002 – KIT003 | 23 |
| Equipos de posicionamiento | ORKIT001 – ORKIT004 | 24 |



Almohadillas de mesa de operaciones



Modelos 40106, 40107, y 40108

Juego de almohadillas de reposición de 3 piezas compuesto

Modelo 40106 compatible con Amsco 1080 y 2080

Modelo 40107 compatible con Amsco 3080

Modelo 40108 compatible con Amsco 5001, 6001 y 6500

Polímero AKTON de 3/8" sobre espuma de alta densidad de 2" AKTON de 0,95 cm sobre espuma de alta densidad de 5,1 cm

Este juego de almohadillas de reposición de quirófano de 3 piezas ofrece reducción de cizallamiento, distribución uniforme de presión y protección de traumatismo del tejido. La combinación del polímero AKTON y la espuma de alta densidad ofrecen efectividad clínicamente probada. Las almohadillas son fáciles de limpiar, manejar y mantener. La construcción sin costura y costuras selladas perineales ofrecen resistencia mejorada al fluido.

* Tamaños adicionales de almohadillas de quirófano están disponibles en mercados seleccionados.



Modelo 40100

Cubierta quirúrgica de Action®, mediana

Modelo 40100

46 x 20 x 1/2" 117 x 50 x 1,3 cm

Esta almohadilla de mesa se usa para una variedad amplia de procedimientos. Su uso es especialmente importante en procedimientos que duran más de una hora o para pacientes con problemas circulatorios. En los casos de corazón abierto y otros procedimientos que exigen posición del paciente de espaldas por largo tiempo son aplicaciones ideales para esta almohadilla de mesa. Esta almohadilla se recomienda también para procedimientos pediátricos, y se puede usar junto con una almohadilla de mesa 40105 para uso en mesas de cuerpo entero.



Modelo 40101

Cubierta quirúrgica de Action®, grande

Modelo 40101

Cuerpo entero

72 x 20 x 1/2" 183 x 50 x 1,3 cm

Esta almohadilla es la misma como la 40100 excepto es de cuerpo entero. Provee distribución del peso del paciente uniforme de extremo a extremo para procedimientos de corazón abierto, torácicos y abdominales. Debido a que la almohadilla provee un nivel alto de comodidad a pacientes bajo anestesia local, tales como procedimientos de cataratas, el movimiento del paciente se minimiza. Los casos que necesitan posicionamiento lateral o boca abajo deberían también incluir esta almohadilla.

POSICIONAMIENTO BODY SMART®

Almohadillas de mesa de operaciones



Cubierta quirúrgica de Action® , con recorte perineal

Modelo 40103

46 x 20 x 1/2" con recorte 117 x 50.8 x 1.3 cm con recorte

Diseñado para la posición de litotomía, esta almohadilla se usa para una amplia variedad de aplicaciones en quirófanos regulares y de cistoscopia.



Modelo 40103

Juego de cubiertas quirúrgicas de Action de 3 piezas


Modelo 40

Cabeza 20 x 9 x 1/2" 50,8 x 22,9 x 1,3 cm

Torso 39 1/2 x 20 x 1/2" 100,3 x 50,8 x 1,3 cm de recorte perineal

Pie 20 x 20 x 1/2" 50,8 x 50,8 x 1,3 cm de recorte perineal

Este juego incluye almohadillas de sección de cabeza, torso y pie para el uso con mesas segmentadas. Es ideal para una amplia variedad de procedimientos para proveer la reducción completa de presión y cizallamiento a lo largo de la superficie entera de la mesa.

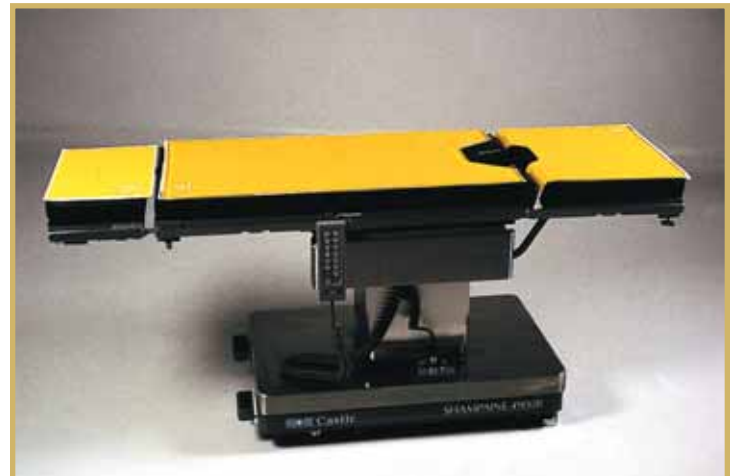


Modelo 40104

Cubierta quirúrgica de Action®, pequeña

Modelo 40105

20 x 20 x 1/2" 50.8 x 50.8 x 1.3 cm

Una almohadilla versátil, excelente para mesas de cistoscopia o cualquier procedimiento ortopédico y cardiovascular. Se puede usar en combinación con los modelos 40100 o 40103 para lograr un juego de almohadillas para mesa de tamaño completo. A menudo usado en extensión de pierna para procedimientos de obstetricia y ginecología y para apoyo en la rectoscopia para procedimientos de proctología.

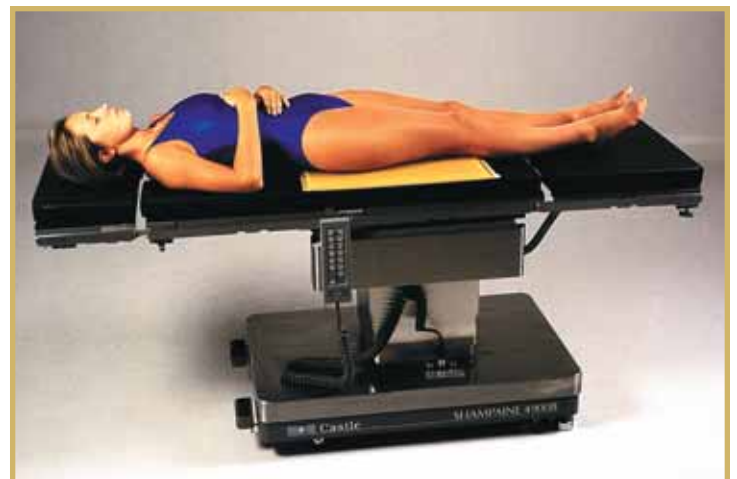

Modelo 40105

POSICIONAMIENTO BODY SMART®



Almohadillas de cabeza



Modelo 40212



Modelo 40201D



Modelo 40211



Modelos 40204, 40205, 40206 y 40211

Almohadillas de cabeza en forma de dona

Modelo 40201- Adulto

8 Dext x 3 Dint x 1 3/4" 20.5 Dext x 7.5 Dint x 4,5 cm

Modelo 40212- Adulto

8 Dext x 3 Dint x 3" 20,5 Dext x 7,5 Dint x 7,5 cm

Modelo 40202 - Pediátrico

5 1/2 Dext x 2 1/4 Dint x 1 1/4" 14 Dext x 5,7 Dint x 3,2 cm

Modelo 40203 - Neonatal

3 1/4 Dext x 1 1/2 Dint x 3/4" 8,3 Dext x 3,8 Dint x 2 cm

Modelo 40218 - Ancha

8 Dext x 4 1/2 Dint x 1 3/4" altura 20.3 Dext x 11.4 Dint x 4.4 cm

Diseñado para proteger y acunar la cabeza de los pacientes, esta almohadilla permite fácil acceso al área de la cirugía de la cabeza y el cuello. Se puede usar para una variedad de procedimientos incluyendo cirugía plástica, de orejas, nariz, y garganta, general y oftálmica.

Almohadillas de cabeza en forma de dona, con plato central

Modelo 40201D- Adulto

8 Dext x 3 Dint x 1 3/4" 20,5 Dext x 7,5 Dint x 4,5 cm

Modelo 40202D - Pediátrico

5 1/2 Dext x 2 1/4 Dint x 1 1/4" 14 Dext x 5,7 Dint x 3,2 cm

Modelo 40203D - Neonatal

3 1/4 Dext x 1 1/2 Dint x 3/4"

El diseño del plato central se adapta a la cabeza del paciente para apoyo y prevención de presión. Esta almohadilla se puede usar en una variedad de procedimientos de cirugía así como para posicionamiento en unidades de cuidado intensivo neonatales.

Almohadillas de cabeza en forma de herradura

Modelo 40204- Adulto

8 Dext x 3 Dint x 1 3/4" 20,5 Dext x 7,5 Dint x 4,5 cm

Modelo 40211- Adulto

8 Dext x 3 Dint x 3" altura 20,5 Dext x 7,5 Dint x 7,5 cm

Modelo 40205 - Pediátrico

5 1/2 Dext x 2 1/4 Dint x 1 1/4" 14 Dext x 5,7 Dint x 3,2 cm

Modelo 40206 - Neonatal

3 1/4 Dext x 1 1/2 Dint x 3,4" altura 8,3 Dext x 3,8 Dint x 2 cm


Diseñado para pacientes en posición boca abajo o lateral. La configuración en herradura provee el paso de aire despejado y ayuda al anestesiista mientras los pacientes están en la posición boca abajo o lateral, con la cabeza de lado.

Almohadilla de cabeza en posición supina

Modelo 402

9 x 10 x 2 1/4" 23 x 25 x 5,7 cm

Esta almohadilla de cabeza se puede usar para la mayoría de posiciones supinas. Después de colocar la cabeza del paciente en esta almohadilla, el plato central se ajusta para apoyo y prevención de presión.

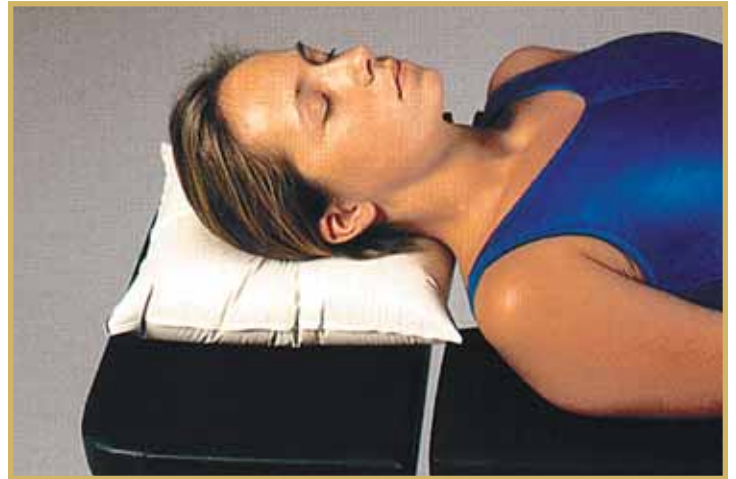

Modelo 40200

Almohadilla de cabeza en forma lateral, con plato central

Modelo 4020

9 x 10 x 1" 23 x 25 x 2,5 cm

Para procedimientos de cirugía lateral. Reduce la presión sobre el lado de la cara y la oreja del paciente. Se puede usar también para alcanzar la alineación de la altura deseada del paciente para accesibilidad óptima para el equipo de cirugía.



Modelo 40207

Apoyacabeza boca abajo, mediano

Modelo 40216M

8 3/4 x 7 3/4 x 4 3/4" 22,2 x 19,7 x 12 cm

Diseñado para pacientes sometidos a procedimientos mientras están en posición boca abajo. La cabeza y la cara del paciente están protegidos y se puede acceder a los tubos endotraqueales a través por los canales ya sea de lado como desde la parte inferior del apoyacabeza. Esto permite fácil acceso al anestesista.

Apoyacabeza boca abajo, grande

Modelo 40216L

10 5/8 x 9 x 5 1/4" 27 x 22,9 x 13,4 cm


Una versión más grande de nuestro apoyacabeza boca abajo popular, este producto se diseña para ayudar a mantener la cabeza del paciente en una posición recta, neutral durante los procedimientos de posición boca abajo. El polímero AKTON ofrece protección para la cabeza y la cara del paciente. El diseño permite al anestesista acceder a los tubos endotraqueales a través de los canales de lado o desde la parte inferior del apoyacabeza.



Modelo 40216L



Almohadillas de cabeza

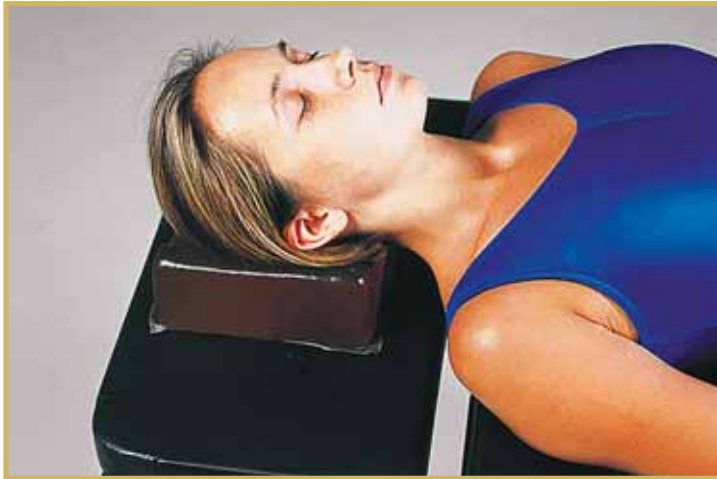

Modelo 40213

Almohadilla de cabeza contorneada

Modelo 40213

7 x 7 x 3 1/4" (1 1/2" contorneada) 18 x 18 x 8 cm

El diseño contorneado de esta almohadilla provee estabilidad óptima de la cabeza del paciente mientras está en la posición supina. Se puede usar también para colocar y proteger la rodilla o canilla de la presión.



Modelos 40209 and 40210

Apoyacabeza oftálmico, pequeño

Modelo 40210

12 x 10 x 2 7/8" 31 x 25 x 7,3 cm

La almohadilla incluye un recorte contorneado para la colocación estable de la cabeza. Para todos los procedimientos oftálmicos, orales y faciales. También provee a los pacientes de un nivel de comodidad mientras están bajo la anestesia local, minimizando el movimiento del paciente. El diseño de esta almohadilla también proporciona apoyo funcional al brazo del cirujano.

Apoyacabeza oftálmico, grande

Modelo 40209

12 x 10 1/2 x 3 7/8" 31 x 27 x 10 cm



Modelo 40217



Modelo 40217P

Apoyacabeza de soporte de horquilla oftálmico para adulto

Modelo 40217

9 x 9 x 1 1/2" forma contorneada

23 x 23 x 3,8 cm forma contorneada

Diseñada originalmente para cirugía de catarata, esta almohadilla versátil ayuda a prevenir el riesgo de alopecia; especialmente durante cirugías largas. Acunar la cabeza del paciente provee estabilidad además de fácil acceso para el cirujano/enfermera. Ideal para muchos procedimientos que incluyen cirugía plástica, de oreja, nariz y garganta y todos los casos oftálmicos.

Apoyacabeza de soporte de horquilla oftálmico pediátrico

Modelo 40217P

7 1/2 x 8 1/2 x 2 1/4" forma contorneada

19 x 21.6 x 5,7 cm forma contorneada

POSICIONAMIENTO BODY SMART®

Almohadillas de brazos/hombros/codos



Almohadilla de placa para brazo compuesta

Modelo 40313-2

26 x 6 x 3 3/8" (radio 2 3/4") 66 x 15 x 6 cm (radio 7 cm)

Almohadilla de placa para brazo compu

Modelo 40313-3

26 x 6 x 3 3/8" (radio 2 3/4") 66 x 15 x 8,6 cm (radio 7 cm)

Estas almohadillas de reposición son una combinación de polímero AKTRON y espuma de alta densidad que ofrecen protección contra cizallamiento, distribución de presión y prevención de traumatismo del tejido. Las almohadillas son ligeras, fáciles de limpiar, manejar y mantener. La construcción sin costura mejora la resistencia al fluido. Un complemento perfecto al juego de almohadillas de mesa compuesta.



Modelo 40313-2



Modelo 40300

Almohadilla de placa para brazo, pequeña

Modelo 40300

15 x 4 x 1/4" 38 x 10 x .6 cm

Para uso en extensiones de mesa de placa para brazo estándares, para proteger las áreas del bicep, codo y antebrazo del paciente.



Modelo 40301

Almohadilla de placa para brazo, larga

Modelo 40301

24 x 4 1/2 x 3/8" 61 x 11.5 x .95 cm

Misma como el modelo 40300, excepto acomoda placas para brazo más largas.

Almohadilla de placa para brazo ancha, corta

Modelo 40309


15 x 6 1/2 x 1/4" 38 x 16.5 x .6 cm

Aumentada en el ancho para adecuar las mesas con placa para brazo más anchas con extensiones. Las almohadillas protegen los bíceps, codos y antebrazos del paciente.

Almohadilla de placa para brazo, larga

Modelo 40308

24 x 6 1/2 x 3/8" 61 x 16.5 x 0.95 cm

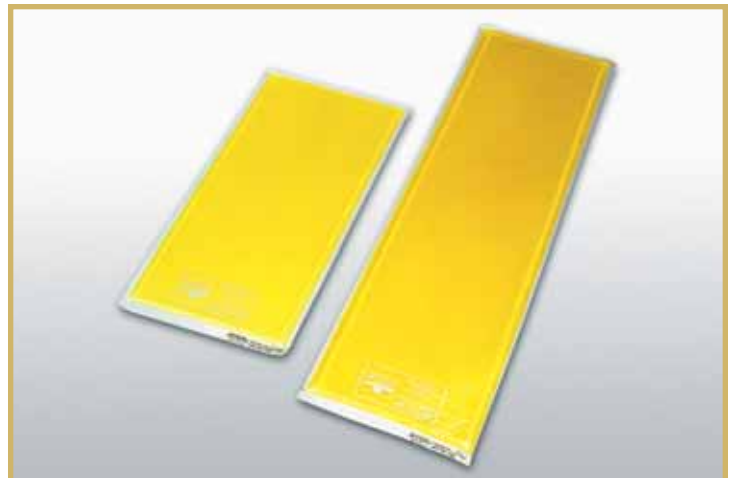


Modelos 40308 y 40309

POSICIONAMIENTO BODY SMART®



Almohadillas de brazos/hombros/codos

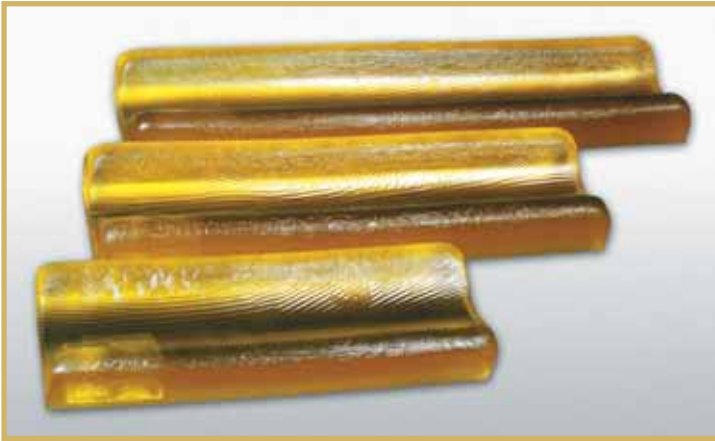

Modelos 40306, 40307 y 40310



Modelo 40315



Modelo 40316-2

Almohadillas de placa para brazo contorneadas

Modelo 40307-pequeña

16 x 5 1/2 x 2" 41 x 14 x 5 cm

Modelo 40310-Mediana

20 x 5 3/4 x 2 1/4" 51 x 15 x 6 cm

Modelo 40306-grande

24 x 5 3/4 x 2 1/4" 61 x 15 x 5 cm

Estas almohadillas de reposición ofrecen excelente cobertura del brazo completo. El diseño contorneado acuna el brazo del paciente; protege los brazos, bíceps, codos, y antebrazos. Las almohadillas contorneadas reducen la posibilidad de hacer rodar el brazo del paciente. Ideal para posición boca abajo, especialmente en procedimientos de laminectomía. El grosor también ofrece altura adicional con armaduras de laminectomía.

Correa estabilizadora de brazo/mano

Modelo 40315

25 x 2 x 1/4" 63.5 x 5 x .635 cm

Correa usada para estabilizar el brazo mientras está sobre la placa para brazo y para proteger la piel de heridas.

Almohadilla de placa para brazo contorneada compuesta, de 26" de largo.

Modelo 40316-2

26 x 6 x 3 3/4" 66 x 15.24 x 9.53 cm

Estas almohadillas de reposición son una combinación de polímero AKTON y de espuma de alta densidad que ofrecen protección contra cizallamiento, distribución de presión y prevención de traumatismo del tejido. Acunan los brazos del paciente y protege los bíceps, codos, y antebrazos. Ideal para posición boca abajo. Complementos a los juegos de almohadillas de mesa compuestas.

Almohadilla tobogán

Modelo 40130

16 1/4 x 8 1/4 x 3/8" 41.3 x 21 x .95 cm

Esta almohadilla está hecha para el uso en conjunto con los escudos (toboganes) de brazo/pierna. Diseñado para prevenir que el brazo o pierna del paciente se extienda sobre el lado de la mesa y prevenir que se apoye en o en contra de las extremidades del paciente. La colocación de la almohadilla entre el paciente y el escudo provee protección de contacto directo con el escudo, reduciendo el riesgo de peligro de cizallamiento o presión.

Almohadilla tobogán, juego de 2 piezas

Modelo 40130-S*

Almohadilla de polímero AKTON #40130

16 1/4 x 8 1/4 x 3/8" 41,3 x 21 x 0,95 cm

Este juego de dos piezas incluye el escudo tobogán y la almohadilla de polímero AKTON #40130. Diseñado para prevenir que el brazo o pierna del paciente se extienda sobre el lado de la mesa y prevenir que se apoye en o en contra de las extremidades del paciente.

* La garantía cubre solo la almohadilla.



Modelos 40130 y 40130-S



POSICIONAMIENTO BODY SMART®

Refuerzo de hombro, juego de 2 piezas

Modelo 40302 - Con accesorios de gancho y asa

5 x 6 x 1" 13 x 15 x 2.5 cm

Diseñado para pacientes en posición de Trendelenburg para proteger las áreas de los hombros. Se puede usar también en otras aplicaciones cuando se necesita un refuerzo o descanso para apoyar al paciente, tal como apoyadores de riñones.



Modelo 40302

Protector de antebrazo cubital

Modelo 40303

18 x 13 x 1/4" 46 x 33 x 6 cm

Esta almohadilla se nombra para su propósito principal. Debería ser envuelto alrededor del brazo y asegurado con accesorio de gancho y asa cuando el brazo del paciente se plegue a su lado.



Modelo 40303

Protector de nervio cubital, pequeño

Modelo 40304

15 3/4 x 6 x 1/2" 40 x 15 x 1.3 cm

Diseñado para el mismo propósito como el modelo 40303, pero configurado de manera diferente para permitir una vista completa del brazo y permitir el acceso fácil al anestesista. La almohadilla se coloca sobre el codo y se acopla de manera segura con el accesorio de gancho y asa.



Protector de nervio cubital, grande

Modelo 40304L

19 x 8 1/2 x 4 x 1/2" 48.2 x 21.6 x 10 x 1.27 cm

Diseñado para permitir una vista mejor del brazo y permitir el acceso fácil por el anestesista. La almohadilla se coloca sobre el codo y se acopla de manera segura con el accesorio de gancho y asa.



Modelo 40304



Almohadilla de apoyo de mano/muñeca

Modelo 40321

11 x 3 1/4 x 2 3/8" 28 x 8,3 x 6 cm dimensiones de la almohadilla

18 3/4 x 2 1/2 x 1/4" 47,6 x 6,4 x 0,6 cm correas sueltas

(2 por juego)

Este producto provee estabilización excelente de la mano y muñeca y accesibilidad para una variedad de procedimientos tales como túnel carpiano, canulación arterial y diálisis. Este apoyo también posiciona idealmente la mano/muñeca para recolectar la arteria radial durante la cirugía de bypass de la arteria coronaria. El centro suave de la espuma visco se cubre por una capa de polímero AKTON. Se incluyen dos correas desmontables para asegurar el brazo. Las dos correas incorporan una capa protectora de polímero de AKTON que mide 3/4 x 2 x 1/4" (26,76 x 5,08 x 0,6 cm)



Modelo 40321



Almohadillas de tobillos/pies/talones



Modelo 40400

Almohadilla de pie para mesa de fracturas

Modelo 40400

12 x 4 x 1/4" 30.5 x 10 x 0.6 cm

Para uso en el apoyador para preparación de pierna y sujetadores de pie para mesa de fracturas.

Almohadilla de apoyo de rodilla, pequeña

Modelo 40402

11 x 9 x 3/8" 27.9 x 22.9 x 0.95 cm

Para uso con estribos para rodilla pequeños, tipo muleta para procedimientos de urología y obstetricia y ginecología. Se puede usar en área poplítea inferior en una variedad de aplicaciones para procedimientos pediátricos.

Almohadilla de apoyo de rodilla, mediana

Modelo 40403

17 x 11 x 1/4" 43 x 27.9 x 0.6 cm


Esta almohadilla es más grande que el modelo 40402. Los usos adecuados incluyen: relleno para la cresta ilíaca, bajo talones y codos y un apoyador de riñones mientras el paciente está en la posición lateral.

Almohadilla de apoyo de rodilla, grande

Modelo 40404

22 x 20 x 1/2" 56 x 50 x 1.3 cm

Recomendado para el uso con estribos de tipo urológico grandes. También se puede usar para funciones similares para modelos 40402 y 40403. Una almohadilla versátil de protección de la presión con utilidad vasta para cualquier quirófano, sala de cistoscopia o centro quirúrgico.

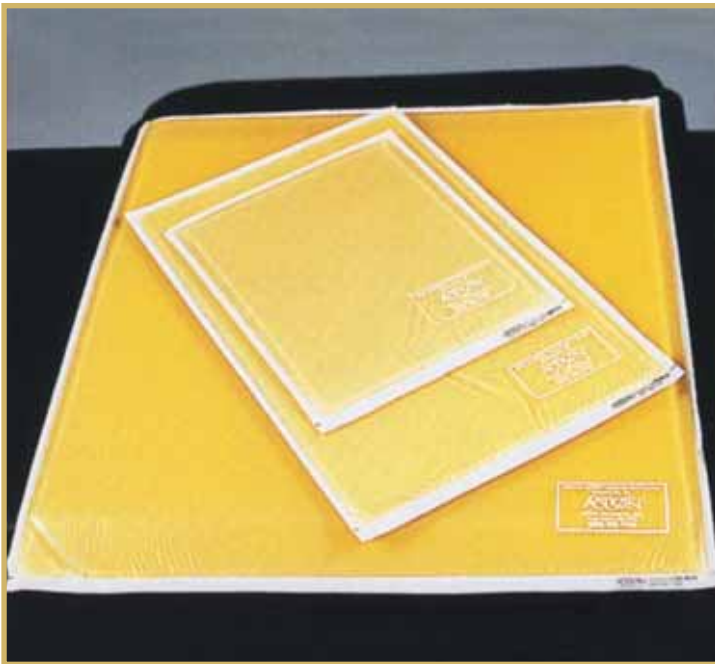

Modelos 40402, 40403 y 40404



Modelo 40404

POSICIONAMIENTO BODY SMART®

Almohadilla protectora de talón

Modelo 40401

12 1/2 x 7 3/4 x 1/2" 32 x 20 x 1.3 cm

Esta almohadilla protectora de talón se debería usar para cualquier procedimiento que sea largo e involucre la presión al área del talón del paciente. Es fácil de usar. Los proveedores de asistencia simplemente colocan el pie del paciente dentro de la almohadilla y lo aseguran con el accesorio de gancho y asa.



Modelo 40401

Apoyo del talón

Modelo 40502

6 x 3 1/4 x 1 3/4" 15 x 8.3 x 4.5 cm

Provee la misma protección como el modelo 40401, sin embargo, configurado para asegurar y proteger el área del talón sin accesorio de gancho y asa. Coloque el talón del cliente en el recorte en copa. El corte detrás de la copa asegura el área del tendón de Aquiles del paciente.



Modelo 40502

Copa de comodidad para talón

Modelo 40520

Provee comodidad y apoyo para los talones. Se puede usar para complementar medias antiembólicas. Apropiado para recuperación y radiología. Viene completo con correa de cierre de AKTON. Tamaño universal.



Modelo 40520



Almohadillas de estribo



Modelo 40500

Conjunto de almohadillas de bota/estribo

Modelo 40500

Diseñado para proteger las áreas del extremo de la pierna y el talón del paciente mientras está en estribos universales. Estas almohadillas deberían emplearse cuando el paciente está en posición de litotomía para procedimientos ginecológicos y urológicos, así como en casos de colon/rectal.




Modelo 40503

Conjunto de almohadillas de estribo de bota SAM

Modelo 40503

72 x 20 x 1/2" 183 x 50 x 1,3 cm

Diseñado para proteger las áreas de la pierna y talón mientras está en estribos SAM. Bolsillos de polímero AKTON aseguran una protección óptima aún en litotomía radical elevada.

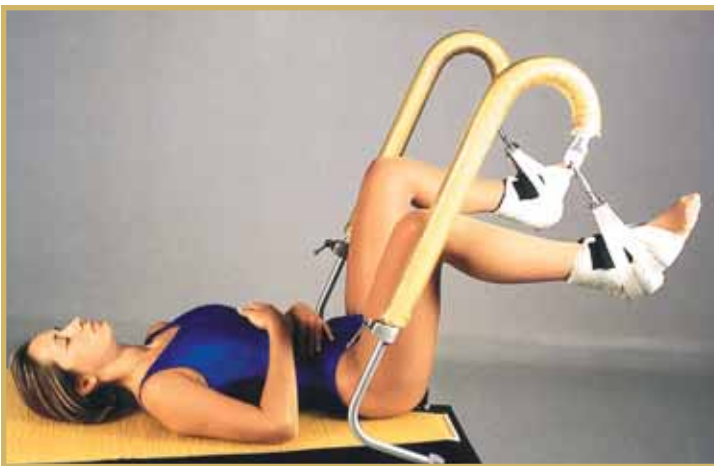

Modelo 40501

Conjunto de almohadillas de estribo bastón de caramelo

Modelo 40501

28 x 2"OD 71 x 5 cm OD

Para pacientes en posición de litotomía, procedimientos de urología y ginecología. Estas almohadillas protegen a los pacientes de presión o cizallamientos que podrían ocurrir mientras está en contacto con estribos de metal. Una vez que se ponen las almohadillas sobre los estribos de bastón de caramelo, no se necesitan quitarse después de cada procedimiento. Esto elimina la necesidad de la envoltura y desenvoltura tediosa y provee protección superior contra la presión y el cizallamiento. Los protectores de talón de Action®, 40401, son un complemento sugerido a nuestras almohadillas de estribo bastón de caramelo.

Conjunto de almohadillas de estribo con correa de tobillo, pequeñas

Modelo 40510

12 1/2 x 1 7/8 x 3/8" 31.7 x 4.7 x .95 cm

Las almohadillas de polímero AKTON para los sujetadores de litotomía. Permite una vista completa de los pies, incluye correas y ganchos. Protege contra el daño de nervios y cizallamiento. Provee protección mientras los pacientes están en la posición de litotomía. Ajustables para asegurar adecuamiento apropiado.



Modelo 40510

Conjunto de almohadillas de estribo con correa de tobillo, grandes

Modelo 40511

Versión más grande de 40510

17 3/8 x 1 7/8 x 3/8" 44.1 x 4.7 x .95 cm

POSICIONAMIENTO BODY SMART®

Rollos de posicionamiento del pecho



Rollos de pecho para adulto

Modelos 40616 – 40621

Esta línea de rollos de pecho de inferiores planos se produce en una variedad amplia de tamaños para acomodar virtualmente a cualquier adulto. Protegen el área del pecho del paciente de la presión mientras está en la posición boca abajo, y ofrecen estabilidad sin rodar. También tienen utilidad infinita como posicionadores para muchos otros procedimientos.

Tamaños para adultos

| | | |
|--------------|---------|--------------|
| Modelo 40616 | 12 x 4" | 30,5 x 10 cm |
| Modelo 40617 | 16 x 4" | 40,6 x 10 cm |
| Modelo 40618 | 20 x 4" | 50,8 x 10 cm |
| Modelo 40619 | 12 x 6" | 30,5 x 15 cm |
| Modelo 40620 | 16 x 6" | 40,6 x 15 cm |
| Modelo 40621 | 20 x 6" | 50,8 x 15 cm |



Modelo 40617



Modelos 40616, 40617, 40618, 40619, 40620 y 40621

Rollos de pecho pediátricos

Modelo 40639 – 40646

Esta línea de rollos de pecho de inferiores planos pediátricos se produce en una variedad amplia de tamaños para acomodar virtualmente a cualquier paciente. Protegen el área del pecho del paciente de la presión mientras está en la posición boca abajo, y ofrecen estabilidad sin rodar. También tienen utilidad infinita como posicionadores para muchos otros procedimientos.

Tamaños pediátricos

| | | |
|--------------|---------|---------------|
| Modelo 40639 | 6 x 2" | 15 x 5 cm |
| Modelo 40640 | 8 x 2" | 20 x 5 cm |
| Modelo 40641 | 10 x 2" | 25.5 x 5 cm |
| Modelo 40642 | 12 x 2" | 30.5 x 5 cm |
| Modelo 40643 | 6 x 3" | 15 x 7.5 cm |
| Modelo 40644 | 8 x 3" | 20 x 7.5 cm |
| Modelo 40645 | 10 x 3" | 25.5 x 7.5 cm |
| Modelo 40646 | 12 x 3" | 30.5 x 7.5 cm |



Modelos 40639, 40640, 40641, 40642, 40643, 40644, 40645 y 40646

POSICIONAMIENTO BODY SMART®



Rollos de posicionamiento del pecho



Rollos de pecho de inferiores planos contorneados

Rollos de pecho contorneados

Modelo 40622 12 x 6 1/4 x 5" 30.5 x 16 x 13 cm pequeño

Modelo 40623 16 x 6 1/4 x 5" 40.6 x 16 x 13 cm mediano

Modelo 40624 20 x 6 1/4 x 5" 50.8 x 16 x 13 cm grande

Estos rollos de pecho de inferiores planos son contorneados para adaptarse a un tórax de adulto. Las almohadillas proveen estabilidad y gran utilidad. Disponibles en tres tamaños diferentes, las almohadillas a menudo se usan bajo las rodillas y talones para proveer la extensión y levantamiento de las extremidades.



Modelos 40622 y 40624



Conjunto de posicionamiento del pecho

Posicionadores de pecho

Modelo 40625 — Left

28/23 x 8 x 3" 71/58.5 x 20.3 x 7.6 cm

Modelo 40626 — Right

28/23 x 8 x 3" 71/58.5 x 20.3 x 7.6 cm

Estos posicionadores tienen un diseño estampado para adecuar de manera cómoda el área del hombro al pecho del paciente, con bordes redondeados para la axila. Proveen un posicionamiento óptimo de la parte superior del cuerpo mientras alivian la presión en el área del tórax.



Modelos 40625 y 40626

Cubierta del rollo de pecho

Modelo 40600 - Accesorio de gancho y asa

18 x 18 x 1/2" 45 x 45 x 1.3 cm

Diseñado para envolverse alrededor de los rollos de tipo control de estafilococo que ya tienen las instalaciones. Se puede usar también como un posicionador autónomo.

Cubierta de rollo axilar

Modelo 40601 - Con accesorio de gancho y asa

17 x 12 x 1/2" 43 x 30.5 x 1.3 cm

Esencialmente el mismo modelo como 40600 excepto más pequeño.



Modelos 40600 y 40601

POSICIONAMIENTO BODY SMART®

Posicionadores de paciente

Modelo 40602 - pequeño

10 x 4 1/2 x 2" 25.4 x 11.4 x 5 cm

Modelo 40605 - grande

14 x 4 1/2 x 2" 35.5 x 11.4 x 5 cm

Modelo 40615 - extra largo

18 x 4 x 2" 46 x 10 x 5 cm

Elimina el uso de sacos de arena con este posicionador extremadamente versátil; bueno para cualquier procedimiento. Beneficiosos para traqueotomía, tiroidectomía, casos de amígdalas y adenoideo y catarata u otros procedimientos oftálmicos. Comprando todos los tres tamaños mejorará la versatilidad de cualquier equipo.



Modelos 40602, 40605 y 40615

Cubierta Universal Vac-Pac™

Modelo 40612

37 x 28 x 1/2" 94 x 71 x 1.3 cm

Esta almohadilla está hecha para cubrir la Vac-Pac (bolsa de granos). Para procedimientos ortopédicos, torácicos o urológicos que dicta que el paciente esté estable en la posición lateral. También ideal para procedimientos de cadera y riñón/hígado.

Vac-Pac es una marca comercial de Olympic Medical



Modelo 40612



Modelo 40613

Cubierta Vac-Pac™ en forma de T

Modelo 40613

34 x 15" (inferior) 86,5 x 38 cm; 23 x 9" (superior) 58,5 x 23 cm

Esta almohadilla se usa para esencialmente los mismos tipos de procedimientos como el modelo 40612, sin embargo, la configuración es específicamente para la Vac-Pac (bolsa de granos) en forma de T. Esta almohadilla se diseña para cubrir la Vac-Pac en forma de T siempre que se emplee.

Posicionador torácico graduado

Modelo 40604

14 x 9 x 2 — 1 1/2" 36 x 23 x 5 — 3.8 cm


La configuración graduada o inclinada de esta almohadilla permite extensión total del pecho. Está diseñado para procedimientos cardiovasculares o torácicos, los cuales exigen hiperextensión completa del pecho. También provee protección excelente de los nervios cuando se coloca bajo las rodillas en posición supina o entre las rodillas.



Modelo 40604



Posicionadores

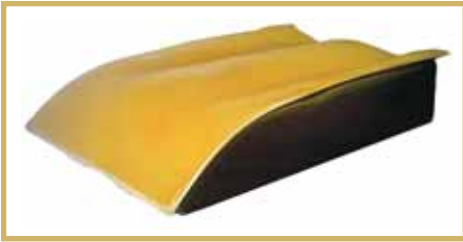

Modelo 40718LP



Modelo 40718LP-2



Modelo 40610



Modelo 40630



Modelo 40603

Posicionador en forma de pierna de rana de bajo perfil

Modelo 40718LP

32 x 21 x 5" incluye 1/4" polímero AKTON

81,3 x 53,3 x 12,7 cm incluye 0,6 cm polímero AKTON

Posicionador en forma de pierna de rana doble, conjunto de 2 piezas

Modelo 40718LP-2

32 x 10,5 x 5" incluye 1/4" polímero AKTON

81,3 x 26,6 x 12,7 cm incluye 0,6 cm polímero AKTON

El posicionador en forma de pie de rana provee máximo acceso al sitio para recolectar venas safenas. La base contorneada, de doble canal y el diseño de perfil bajo sirven para elevar las piernas en una posición ideal para este propósito. La capacidad de lograr la posición apropiada rápidamente ahorra tanto tiempo como dinero mientras elimina la necesidad de uso costoso e ineficiente de toallas dobladas y sacos de arena. Construido de espuma de alta densidad, la base contorneada está cubierta por una capa de polímero AKTON de 1/4" (0,6 cm) con accesorios de ganchos y asas.

Posicionador lateral

Modelo 40610

28 x 19 1/2 x 6 to 1" 71.1 x 49.5 x 15.2 x 2.5 cm

Un producto único diseñado para proteger al paciente mientras está en la posición lateral. Acomoda tanto el hombro como el brazo superior. Provee alivio de presión y protección de los nervios. Apropiado para procedimientos de pecho, ortopédicos o de riñón. Incluye una almohadilla y una capa para comodidad y protección óptima.

Posicionador trapezoide

Modelo 40630

10 x 7 x 3 1/2" 25.4 x 17.8 x 8.9 cm

La función principal de esta almohadilla es para procedimientos de cirugía en los cuales el paciente debe tener separación despejada entre las piernas. Puede también usarse como un posicionador estabilizador o para prevenir la caída del pie.

Posicionador en forma de cúpula

Modelo 40603

14 x 6 x 3" 36 x 15 x 7.6 cm

Diseño semicircular con configuración inferior plana provee protección de presión debajo de las rodillas mientras el paciente está en posición supina. También previene la caída del pie para pacientes en posición boca abajo. Se puede usar también debajo del metatarsiano o debajo del pie en contra de la placa, en la posición de semi-Fowlers.

POSICIONAMIENTO BODY SMART®

Juego de posicionadores pediátricos

Modelo 40614

20 x 9 x 2" Almohadilla 50,8 x 22,9 x 5 cm

Este juego de almohadillas es una unidad de posicionamiento multipropósito diseñado para posicionar y proteger a los recién nacidos y niños pequeños durante una variedad de procedimientos. El juego consiste de una almohadilla en forma rectangular con un canal abollado en el centro para permitir la expansión del pecho, una almohadilla en forma de herradura pediátrica y dos tubos de posicionamiento cilíndricos. La utilización sugerida del juego es: coloque la almohadilla plana, sin tubos, para prevenir que el paciente ruede mientras está en la posición supina. Colocando un tubo debajo de la almohadilla en el área torácica, el pecho se quedará extendido para procedimientos de pecho de adelante. Con el tubo pequeño debajo de la almohadilla en el tórax y el tubo grande debajo de la almohadilla relativo al sacro, el acceso es óptimo para casos supinos posteriores, tales como tales como una resección de tumor espinal.



Modelo 40614

Almohadilla moisés, pequeña

Modelo 40120

26 x 12 x 1/2" 66 x 30.5 x 1.27 cm

Provee presión delicada y alivio a cizallamiento para pacientes pediátricos o neonatales. Libre de látex.



Modelo 40120

Almohadilla incubadora

Modelo 40120L

26 x 16 x 1/2" 66 x 40.6 x 1.3 cm

Provee presión delicada y alivio a cizallamiento para pacientes neonatales en las unidades de NIC. Diseñado para las camas incubadoras.



Modelo 40120L

Protector de frente

Modelo 40208

2 1/2 x 1 5/8 x 5/8" 6.3 x 4 x 1.5 cm

El protector es semicircular con un fondo plano. Se usa para proteger la frente del paciente infante, niño, o adulto de la presión ejercida por los tubos de oxígeno, etc. Como todos los productos de Action®, el protector de frente está libre de látex.



Modelo 40208

POSICIONAMIENTO BODY SMART®



Almohadillas para armadura especial



Modelos 40703, 40704 y 40707



Modelos 40704 y 40707

Almohadilla de cadera para mesa de fracturas

Modelo 40703

8 x 5 1/2 x 1/2" 20 x 14 x 1.3 cm

Diseñado para el uso en la placa de la mesa de fracturas, la función principal de esta almohadilla es reducir la presión y el cizallamiento en el área relativo al sacro. Se debería usar en combinación con el modelo 40704, almohadilla para poste de mesa de fractura.

Almohadilla para poste de mesa de fracturas

Modelo 40704-con accesorios de ganchos y asas

7 x 5 x 1/2" 18 x 12.7 x 1.3 cm

Almohadilla de cadera para mesa de fracturas

Modelo 40707

1 3/4" 4,5 cm de diámetro del agujero para acomodar postes perineales.

Esta almohadilla reduce la presión y cizallamiento en pacientes en sus áreas de escroto y pierna superior. También elimina la tarea tediosa de envolver y desenvolver el poste de la mesa de fracturas con varios artículos provisionales tales como gasa, toallas, etc.

Juego de almohadillas de cresta ilíaca de McGuire

Modelo 40708

3 x 3 1/4 x 1 7/8 Dext; 2 1/8 x 2 3/8 x 1" Dint

7,6 x 8,3 x 4,8 Dext; 5,5 x 6 x 2,5 cm Dint

Las almohadillas de cresta iliaca protegen la cresta iliaca contra la presión y el cizallamiento ejercidos desde la armadura.

Juego de cubiertas de almohadillas de armadura de McGuire, de 2 piezas

Modelo 40709

4 x 4 1/2 x 2 3/8 Dext; 3 x 3 1/4 x 1 7/8" Dint

10 x 11.4 x 6 Dext; 7,6 x 8,3 x 4,8 cm Dint

Misma como arriba. Cubre almohadillas de poste existentes en la armadura de McGuire.

Almohadilla para cadera/relativa al sacro de McGuire

Modelo 40710

26 x 10 x 1/2" 66 x 25.5 x 1.3 cm

Protege el sacro, el iliaco y el área sobre el trocánter mayor de la presión.



Modelos 40708, 40709 y 40710




Modelos 40708, 40709 y 40710

POSICIONAMIENTO BODY SMART®

Juego de almohadillas para armadura de Relton, de 4 piezas

Modelo 40700

Este juego de 4 piezas se diseña para adecuar con abrigo sobre los cuatro postes de la armadura de Relton. Los pacientes en la posición boca abajo en la armadura de Relton tienen presión extrema localizada en las cuatro áreas de contacto de los postes. El juego de almohadillas de Relton provee protección contra la presión, reduciendo la posibilidad de daño a tejidos/nervios del paciente relacionados con la presión, sin considerar la duración.

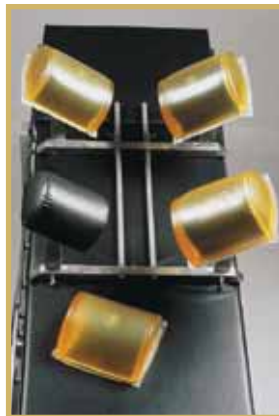

Modelo 40700

Juego de cubiertas de armadura espinal de C.H.O.P., de 4 piezas

Modelo 40711

7 1/2 diámetro x 3" alto 19 x 7,6 cm

Diseñada para adecuar sobre vainas de soporte para pacientes en forma de platillo existentes en la armadura espinal de C.H.O.P. Provee a los pacientes con protección contra la presión y cizallamiento. Se puede usar en cualquier procedimiento que requiera el uso de la armadura de espinal de C.H.O.P.



Modelo 40711 - exterior



Modelo 40711 - interior

Juego de almohadillas de armadura de espinal de Kambin

Modelo 40712


Este juego de almohadillas está hecho especialmente para la armadura de Kambin. Las almohadillas se ponen fácilmente a las superficies de apoyo del paciente y se acoplan firmemente con accesorios de ganchos y asas. Este juego de almohadillas se puede usar siempre que el procedimiento exija la armadura de Kambin.



Modelo 40712



Almohadillas para armadura especial

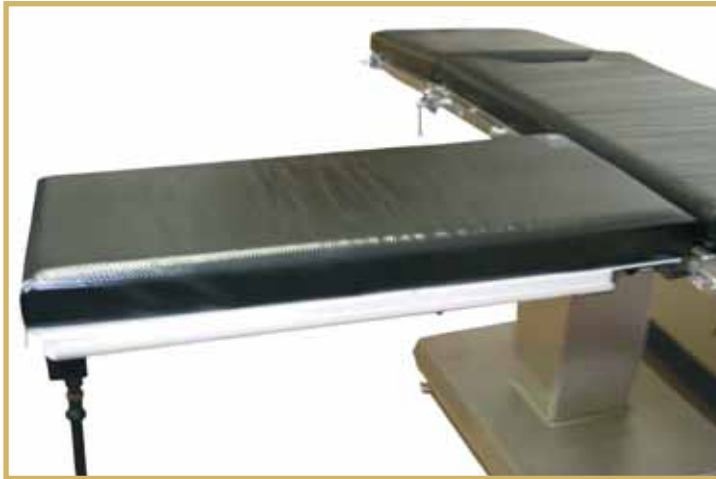

Modelo 40320

Almohadilla de mesa compuesta para mano

Modelo 40320

34 1/4 x 16 1/4 x 2 3/8" 87 x 41.3 x 6 cm

Esta combinación de polímero AKTON y espuma de alta densidad ofrece efectividad clínicamente comprobada para procedimientos quirúrgicos que involucren el antebrazo, codo y mano del paciente. La almohadilla es fácil de limpiar y mantener. La construcción sin costura mejora la resistencia al fluido.



Modelo 40330

Almohadilla de mesa para mano en forma de reloj de arena

Modelo 40330

32 x 24 x 1/2" 81.3 x 61 x 1.2 cm

Diseñado para usarse en conjunto con una mesa para mano en forma de reloj de arena, este producto es apropiado particularmente para procedimientos extensos de microcirugía de mano que requieren protección adicional de alivio de presión. Adecuado para todos los procedimientos de mesa para mano en forma de reloj de arena, la capa es de polímero AKTON de 1/2" (1,27 cm).



Modelo 40110

Almohadilla de armadura Montreal

Modelo 40110

18 1/4 x 12 x 1/2" 46.3 x 30.5 x 1.3 cm

Diseñado como una almohadilla de posicionamiento para la plataforma principal del dispositivo de posicionamiento lateral Montreal. Esta almohadilla se usa en una posición de decúbito lateral que involucra un procedimiento total de cadera.

POSICIONAMIENTO BODY SMART®

Almohadillas para armadura especial



Cubierta de apoyador Mayo

Model 40717

21 x 18 1/2 x 5/8" 53.3 x 47 x 1.6 cm

Diseñada para cubrir el apoyador de Mayo de tamaño 21" x 16". Utilizada para prevenir daño de presión y a los nervios cuando se coloca una extremidad en el apoyador Mayo para posicionamiento durante los procedimientos ortopédicos así como para pacientes en la posición lateral.



Modelo 40717

Cubiertas cómodas para taburete de Action®

Modelo 40900

13" de diámetro 33 cm

Modelo 40901

14" de diámetro 35,5 cm

Modelo 40902

15" de diámetro 38 cm

Polímero AKTON de tres octavos de pulgada (3/8") (0,95 cm) unido a una falda oxford de nilón con cierre de cordón.




Modelo 40900

POSICIONAMIENTO BODY SMART®



Almohadillas para armadura especial

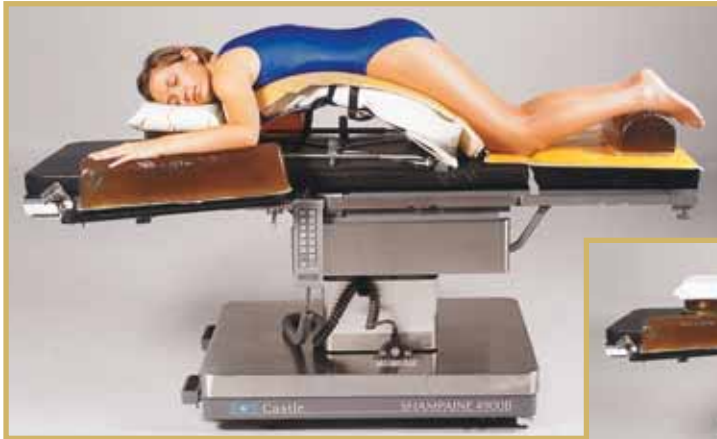

Modelo 40701

Juego de almohadillas para armadura Wilson, de 2 piezas

Modelo 40701

29 x 10 x 1/2" 74 x 25.4 x 1.3 cm

Juego de almohadillas para armadura Wilson, de 2 piezas

Modelo 40702

Modelo 40702

29 x 10 x 1" 74 x 25.4 x 2.5 cm

Diseñada para cubrir la armadura Wilson y proveer a los pacientes con protección adicional contra cizallamiento y presión. Las almohadillas pasan fácilmente sobre la armadura y se deberían asegurar con

accesorios de ganchos y asas. Para procedimientos ortopédicos y de neurocirugía cuando se usa la armadura Wilson.



Almohadilla de rodilla para Andrews Frame™

Modelo 40705

22 x 16 x 1" 56 x 40.6 x 2.5 cm

Diseñada para el uso con la Andrews Frame a la plataforma de la rodilla para aliviar la presión y el cizallamiento.


Almohadilla de iliaca para Andrews Frame™

Modelo 40706

24 x 6 x 3/8" 61 x 15 x .95 cm

Almohadilla de reducción de presión se acopla fácilmente a la correa ajustable con accesorios de ganchos y asas. Reduce la presión en las áreas de la cresta iliaca y del muslo.

Andrews es una marca comercial de Orthopedic Systems, Inc.

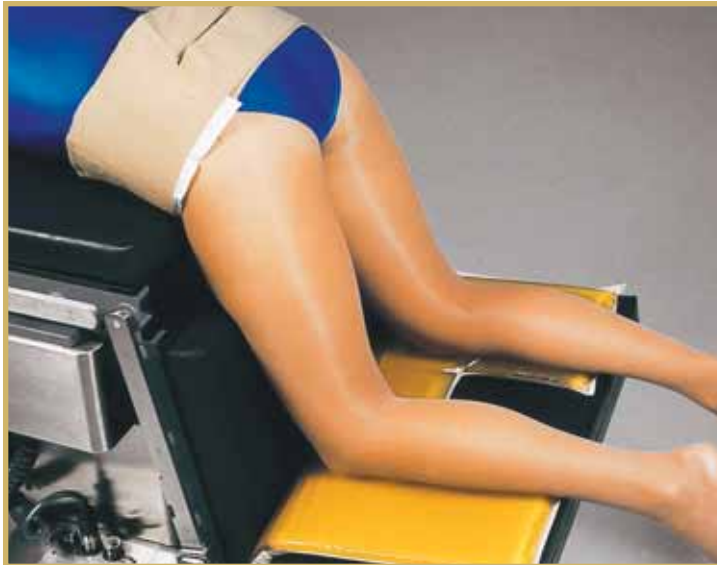

Modelos 40705 y 40706


Almohadilla de posicionamiento Action®

Modelo 40713

56 1/2 x 3 1/2 x 1/4" 143.5 x 8.9 x .6 cm

Polímero AKTON mide 38 1/2 x 3 1/4 x 1/4" 98 x 8,2 x 0,6 cm

Este producto esta hecho para procedimientos que requieren la minimización del movimiento del paciente. El diseño único combina el polímero AKTON y un método conveniente, ajustable para acoplarlo de manera segura al lado de las barandillas de todas las mesas de quirófano estándares.

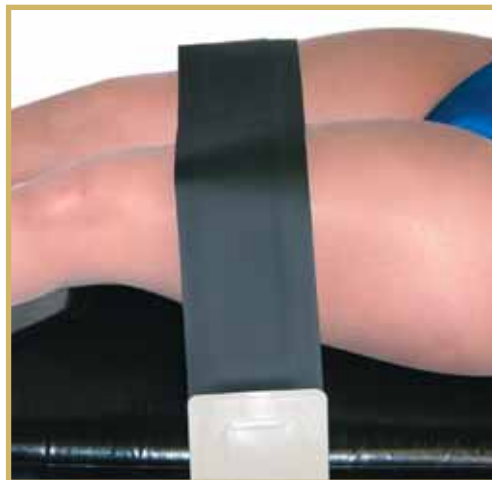

Modelo 40713

POSICIONAMIENTO BODY SMART®

Cubierta de capa desechable de Action®, estilo funda de almohada

Modelo 40102

Estas cubiertas están hechas para el uso con modelos de almohadillas para mesa 40100 y 401001. Se recomiendan para procedimientos con un grado alto de riesgo de infección. Estos escudos también aumentan la vida útil de la almohadilla y ayudan en la limpieza después del procedimiento.



Modelo 40102

Cubiertas de capa desechables de Action®, estilo sábana entallada


Modelo 40800 - hecho para el modelo de almohadilla de mesa 40100

Modelo 40801 - hecho para el modelo de almohadilla de mesa 40101

Modelo 40803 - hecho para el modelo de almohadilla de mesa 40103

Modelo 40804 - hecho para el modelo de almohadilla de mesa 40104

Modelo 40805 - hecho para el modelo de almohadilla de mesa 40105

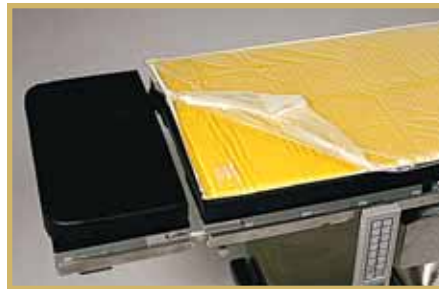

Modelos 40800, 40801, 40803, 40804 y 40805

Almohadilla para biopsia de seno

Modelo 40715

30 x 22 3/4 x 3/8" 76.2 x 57.8 x .95 cm

Agujero de 9 3/8" (23,8 cm) de diámetro con lados redondeados.

Provee comodidad, estabilidad y protección durante el procedimiento específico crucial. Beneficios para el usuario y pacientes. El tamaño es universal.



Modelo 40715

Parche para reparación

Kit002

4 x 4" 10 x 10 cm


Diseñado para reparación rápida y fácil de cortes pequeños o pinchazos en cualquier almohadilla de ACTION®.

Rollo para reparación

Kit003

36 x 4" 91 x 10 cm

Diseñado para reparación rápida y fácil de cortes grandes o pinchazos en cualquier almohadilla de ACTION®.


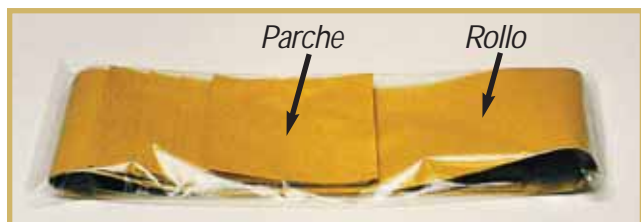


Kit002 y Kit003





Equipos de posicionamiento

Posicionamiento Body Smart®

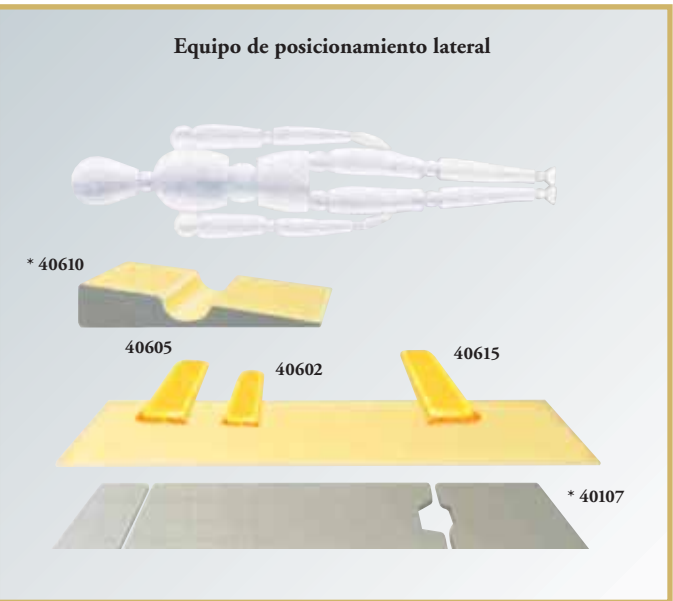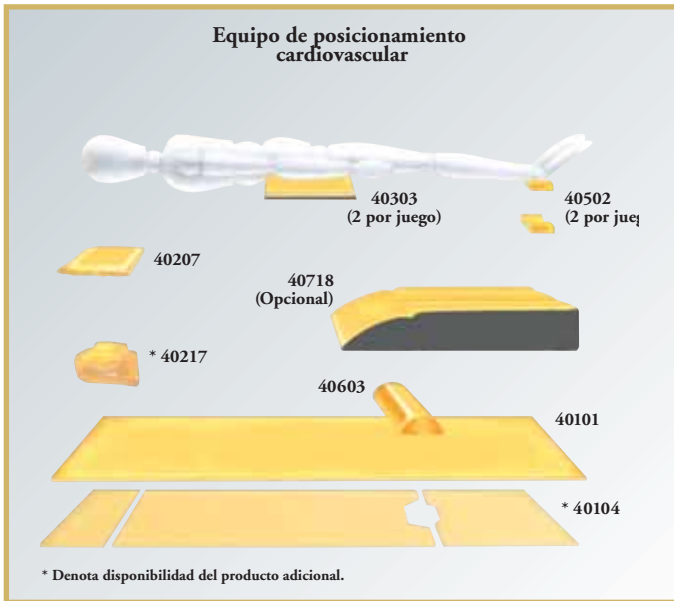

- 1 x 40207 Almohadilla de cabeza lateral
- 2 x 40303 Almohadilla de antebrazo cubital
- 1 x 40101 Almohadilla de capa de Action® grande
- 1 x 40603 Posicionador en forma de cúpula
- 2 x 40502 Posicionador mini copa para talón

- 1 x 40602 Posicionador pequeño
- 1 x 40605 Posicionador grande
- 1 x 40615 Posicionador extra grande

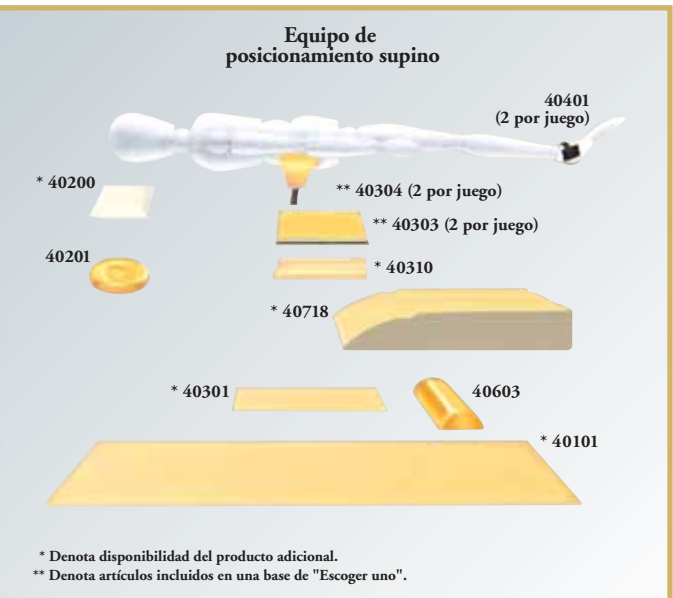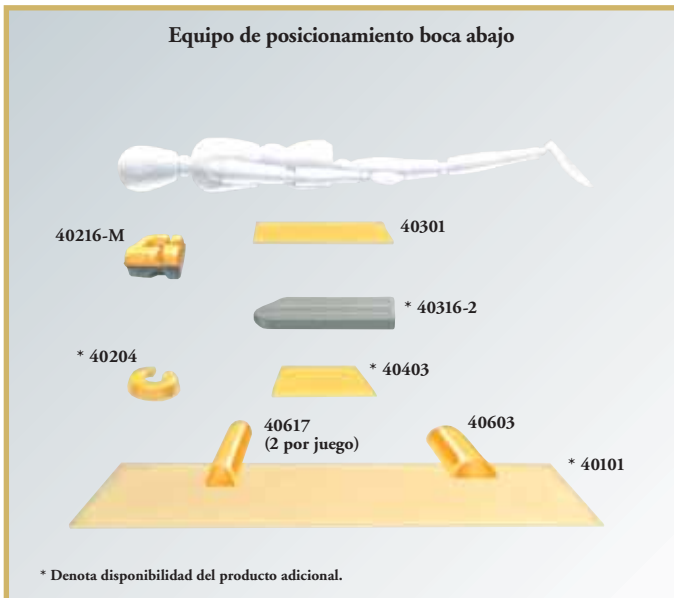

- 1 x 40216M Apoyacabeza boca abajo
- 2 x 40301 Almohadillas de placa para brazo
- 2 x 40617 16 x 4 rollos para pecho del paciente
- 1 x 40603 Posicionador en cúpula

- 1 x 40201 Almohadilla de cabeza en forma de dona
- 1 x 40603 Posicionador en cúpula
- 2 x 40401 Protectores de talón
- ** 2 x 40303/40304 Protector cubital/del nervio

Almohadillas de reposición de quirófano


Encuentre su tamaño perfecto




Juegos de reposición de Action® compuestos

Action Products puede hacer a medida juegos de reposición para prácticamente cualquier marca y tamaño de mesa o sistema de operaciones. Action actualmente produce juegos para todos los estilos de mesas listados abajo.


Juegos de mesas Maquet

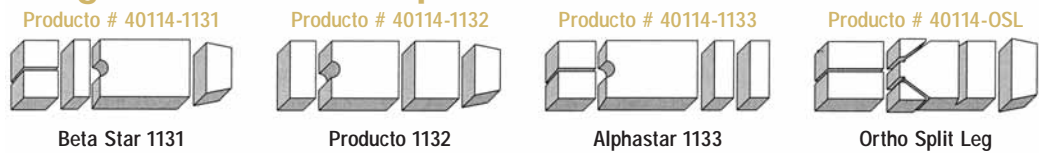


Juegos de mesas Champagne

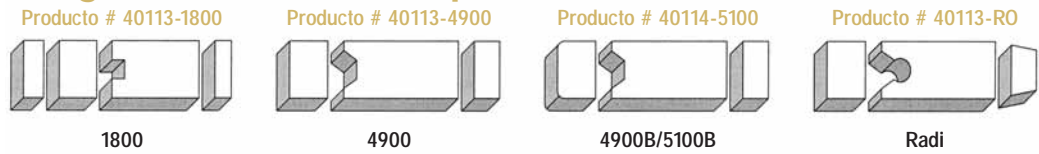


Juegos de mesas Skyton

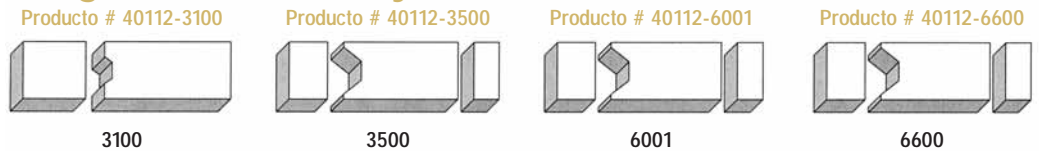


Juegos de mesas Amsco/Steris

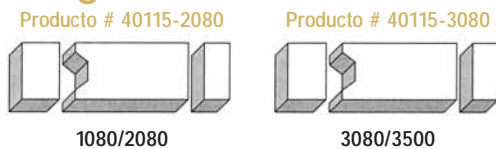

Juegos de mesas Midmark

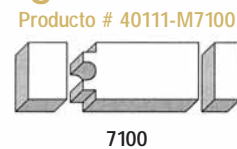

Juegos de mesas Universal Siemens

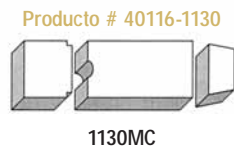

¿NO TENEMOS EL TAMAÑO QUE NECESITA?
 ¡Llame hoy a servicio al cliente para una cotización!



Accesorios de quirófano

Extras



Mesa de mano

Modelo 2100

Superficie operativa de 16" x 34". Almohadilla disponible de Akton® compuesta.

Modelo ultraligero y ultra versátil que ajusta ángulos para procedimientos vasculares. La superficie es radiolúcida, permitiendo excelente acceso para brazo C.



Carrito de almacenaje de doble puerta

Modelo ORSSYS2

Ideal para almacenaje de almohadillas de posicionamiento. Recintos de polímero duraderos. Provee organización y acceso fácil. El armario es de 42,6" de ancho



Mesa de mano

Modelo 3100

Superficie operativa de 16" x 34". Almohadilla disponible de Akton® compuesta.

Abrazaderas de barandillas con accesorio incorporado para montar rápidamente a cualquier mesa o camilla de quirófano estándar. Apoyabrazos opcionales disponibles.



Armario calentador

Modelo ORAP770

Interior de 7,7 pies cúbicos (c.2m) 18 7/8" ancho x 26 3/4" profundidad x 26 7/8" alto

Ideal para calentar almohadillas y mantas de Action®. Portátil y con facilidad de acceso. Viene con interruptor de prendido/apagado y se controla por un termostato electrónico ajustable.



Mesa de mano

Modelo 3000

Superficie operativa de 16" x 34". Almohadilla disponible de Akton® compuesta.

Abrazaderas de barandillas incorporadas montan esta unidad a cualquier mesa y camilla de quirófano. Armadura de aluminio combinada con una ventana de policarbonato radiolúcida.



Unidad de almacenaje

Modelo US300

Estribos, placas para brazos y abrazaderas se almacenan fácilmente en esta unidad de acero de calibre pesado. Los puertos adicionales acomodan a los accesorios redondos o rectangulares. Ofrece la flexibilidad mayor para almacenaje.



Mesa de mano

Modelo 4600

Apoyabrazos moldeado expande el ancho de la mesa a 24" para la comodidad del cirujano. Abrazaderas de montaje para varillas incorporadas se acoplan a cualquier mesa de quirófano. El diseño de mesa de pierna dividida ofrece fácil acceso para brazo C y estabilidad. Forma de reloj de arena. Almohadilla AKTON #40330 disponible.



Almohadilla de mesa de mano

Modelo 40320

La combinación del polímero AKTON y espuma de alta densidad ofrece efectividad clínicamente comprobada para procedimientos quirúrgicos que involucren el antebrazo, codo y mano del paciente. Se puede usar ya sea con las mesas de mano 2100, 3100, o 3000.





Garantía

Se garantizan que las almohadillas de Action® están libres de defectos de materiales y trabajo al momento de su primera compra y son utilizables para un período de dos años siempre que el producto no esté sujeto a mal uso, negligencia, accidente o abuso. Se garantizan que los accesorios están libres de defectos en el trabajo solo al momento de la compra inicial.

Las preguntas específicas sobre la garantía se deberían dirigir a Servicio al cliente al 301-797-1414 (de lunes a viernes de 8 a 5 EST) o a su proveedor/distribuidor.



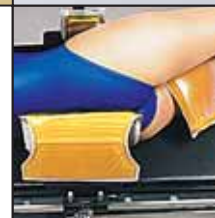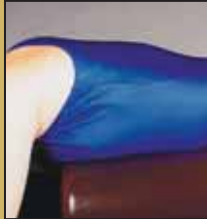

W.R. McElroy, Ph.D.



Fundador de Action Products, Inc. 1970
Inventor del polímero viscoelástico Akton®

ACTION®

Action Products, Inc.

LLAME AL **301-797-1414**

www.actionproducts.com • correo electrónico: service@actionproducts.com

22 N. Mulberry Street • Hagerstown, MD 21740 • U.S.A. Teléfono: 800-228-7763 • Fax 301-733-2073

ACTION, AKTON, Shear Smart, Body Smart and Making A Material
Diference son marcas comerciales registradas de Action Products, Inc. USA
Andrews Frame es una marca comercial de Orthopedic Systems, Inc.
Vac-Pac es una marca comercial de Olympic Medical



La posición de la modelo tiene la finalidad de
mostrar las almohadillas y pueden no estar
correctas quirúrgicamente en cada caso.

© 2005 Action Products, Inc. • HECHO EN E.E.U.U.

